


Olaf

Hundeskelett

Dog Skeleton

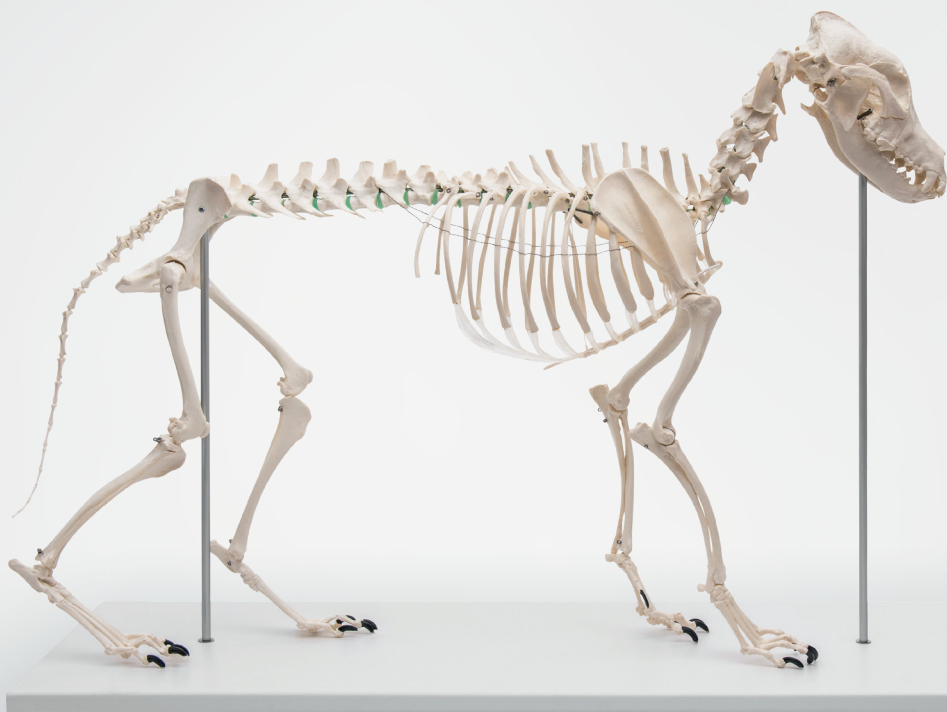

Anleitung / Manual

Art. Nr. / Item No. VET1700

Aufbau Setup



1

Das Modell besteht aus 9 Teilen:

Das Stativ, 2 Stangen, Körper des Hundes, 2 Hinterbeine, 2 Vorderbeine und Schwanz.

The model consists of 9 parts:

A base, 2 rods, body of the dog, 2 hind legs, 2 front legs and tail.



2

Befestigen Sie die zwei Haltestangen auf dem Stativ. Nehmen Sie die Flügelmutter und die Unterlegscheibe ab.

Attach the two retaining rods to the stand. Remove the wing nut and the washer.



3

Führen Sie die Stangen durch die Bohrung im Stativ.


Guide the rods through the hole in the base.



4

Auf der Unterseite des Sockels Unterlegscheibe anbringen und Flügelmutter festdrehen.

Place washer on the bottom of the base and tighten wing nut.

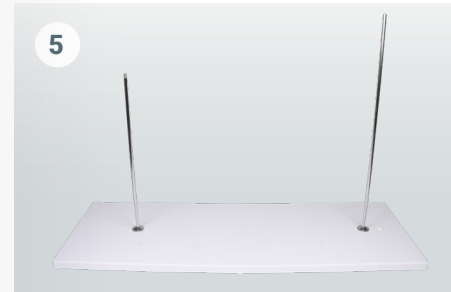

5

Diesen Vorgang mit der anderen Stange genauso durchführen. **Wichtig:** Auf der längeren Stange sitzt der Kopf, auf der kürzeren Stange das Kreuzbein.


Perform the same procedure with the other rod. **Important:** The head sits on the longer rod, the sacrum on the shorter rod.



6

Bohrungen befinden sich im Schädel, sowie im Kreuzbein. Setzen Sie diese auf die Stangen auf.

Holes are located in the skull, as well as in the sacrum. Place them on the rods.

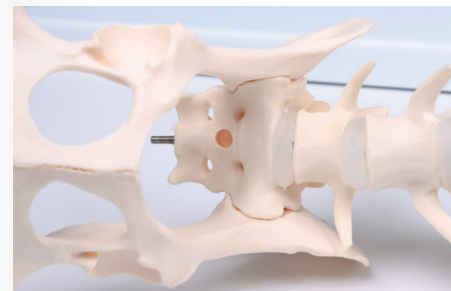

7

Der Schädel auf die **längere** Stange.

The skull on the longer rod.





8

Das Kreuzbein mit Becken
auf die **Kürzere** Stange.

*The sacrum with pelvis
on the shorter rod.*



9

So müsste der Körper jetzt
auf den Stangen liegen.

*This is how the body should
be lying on the rods now.*



10

Der Schwanz wird auf den
Stangenfortsatz im Kreuzbein
aufgesteckt.

*The tail is attached to the rod
process in the sacrum.*



11

Die Hinterbeine werden
per Gummizug befestigt.
Hier muss zuerst das Plastik-
stück abgezogen werden.

*The hind legs are attached
by the elastic strap.
Pull off the plastic piece.*



12

In der Beckenschaufel befindet
sich rechts und links eine Bohrung.

*There is a hole in the right
and left Acetabulum.*



13

Führen Sie den elastischen
Gummizug durch die Bohrung.

*Pass the elastic band through
the hole.*





Wenn das Bein richtig sitzt, fixieren Sie es mit dem Kordelstopper.

When the leg fits properly, fix it with the cord stopper.



Das gleiche gilt auch für die Vorderbeine. Auch hier werden die Beine per Gummizug am Körper befestigt.

The same applies to the front legs. The legs are also attached to the body by the elastic strap.



16

Es befinden sich 4 Schlaufen auf dem Stativ.


There are 4 loops on the base.



17

Hier können die einzelnen Zehen durchgeführt werden

Here the individual toes can be carried out.

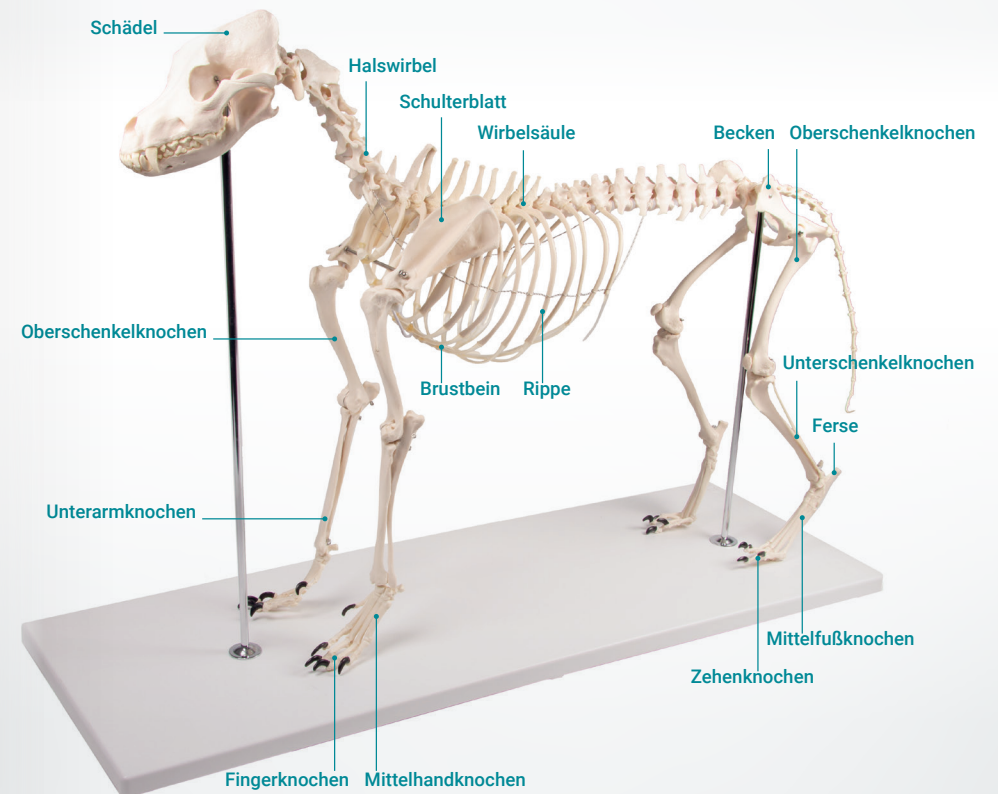

EXPERTS IN MEDICAL EDUCATION

Erler-Zimmer Medical GmbH

Hauptstrasse 27 · 77886 Lauf · Germany

T +49 7841 / 67191-0 · F +49 7841 / 67191-99

info@erler-zimmer.de

www.erler-zimmer.de

