

„Airway Alex“ Wendl/Guedel-Trainer



Merkblatt / Factsheet

Art. Nr. / Item No. 7930

Der Airway Trainer „Airway Alex“

wurde speziell für die praxisnahe Ausbildung im Atemwegsmanagement entwickelt. Das kompakte Trainingsmodell ermöglicht das realistische Üben der Anlage von Wendl- und Guedel-Tuben und eignet sich ideal für die Aus- und Weiterbildung in Rettungsdienst, taktischen Medizin, Pflege, Medizin und Erste Hilfe.

Das flexible Gesicht verfügt über anatomisch gestaltete Nasenöffnungen zur Einführung eines Wendltubus (Nasopharyngealtubus). Dabei bietet der Trainer zwei unterschiedliche anatomische Situationen: Das linke Nasenloch weist eine normale Weite auf, während das rechte Nasenloch verengt ist und eine verkrümmte Nasenscheidewand simuliert. Dadurch können unterschiedliche Schwierigkeitsgrade bei der nasopharyngealen Atemwegssicherung praxisnah trainiert werden.

Der geöffnete Mund ermöglicht sowohl die Lagekontrolle des Wendltubus als auch das Einbringen eines Guedel-Tubus (Oropharyngealtubus). Der naturgetreu nachgebildete Atemweg reicht bis zur Epiglottis und bietet ein realistisches Tast- und Einführungsverhalten. Die weiche, bewegliche Zunge erhöht zusätzlich den Übungswert und simuliert die anatomischen Gegebenheiten eines Patienten.


The “Airway Alex” airway trainer

has been specifically designed for hands-on airway management training. This compact training model allows realistic practice in the insertion of nasopharyngeal and oropharyngeal airways and is ideal for the education and training of EMS professionals, tactical medicine, nurses, medical staff and first aid providers.

The flexible face features anatomically designed nasal openings for the insertion of a nasopharyngeal airway (NPA). The trainer provides two different anatomical conditions: The left nostril has a normal opening, while the right nostril is narrower and simulates a deviated nasal septum. This allows users to practice different levels of difficulty when inserting a nasopharyngeal airway.

The open mouth allows both visual confirmation of the NPA position and the insertion of an oropharyngeal airway (OPA). The realistically reproduced airway extends to the epiglottis and provides realistic tactile feedback during insertion. A soft, movable tongue further enhances the training experience and simulates patient anatomy.




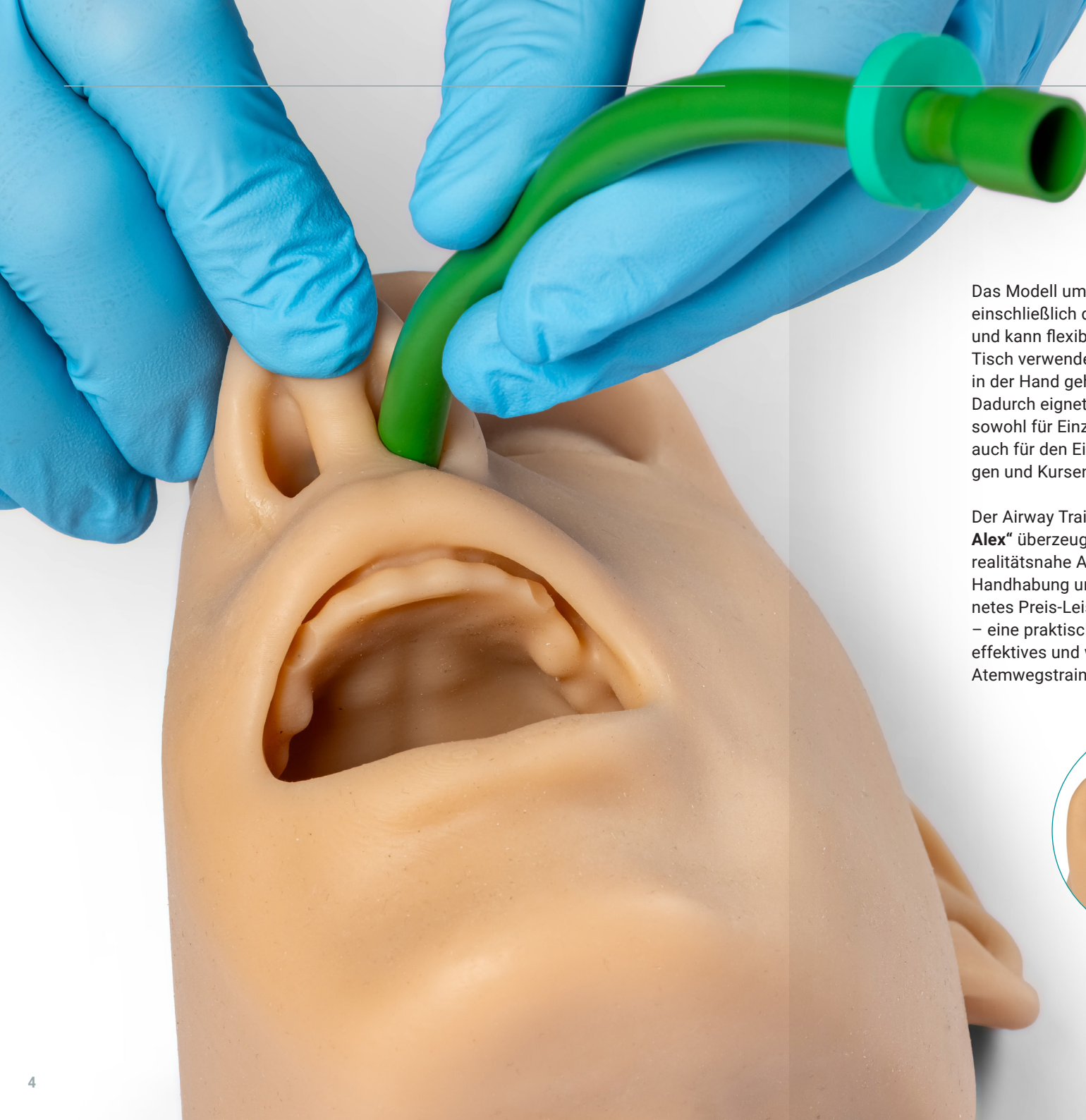


Das Modell umfasst das Gesicht einschließlich des linken Ohres und kann flexibel auf einem Tisch verwendet oder bequem in der Hand gehalten werden. Dadurch eignet sich der Trainer sowohl für Einzelübungen als auch für den Einsatz in Schulungen und Kursen.

Der Airway Trainer „**Airway Alex**“ überzeugt durch seine realitätsnahe Anatomie, einfache Handhabung und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis – eine praktische Lösung für effektives und wiederholbares Atemwegstraining.

The model consists of the face including the left ear and can be used conveniently on a table or held in the hand. This makes the trainer suitable for both individual practice and use in professional training courses.

*The “**Airway Alex**” Airway Trainer combines realistic anatomy, easy handling and excellent value for money – a practical solution for effective and repeatable airway management training.*

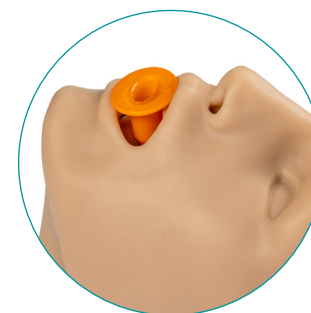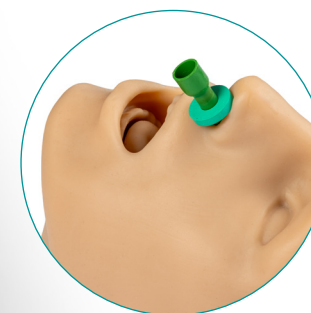

Produktmerkmale

- Realitätsnaher Airway-Trainer für das Atemwegsmanagement
- Anatomisch korrekter Atemweg bis zur Epiglottis
- Unterschiedlich gestaltete Nasenöffnungen für verschiedene Schwierigkeitsgrade
- Rechtes Nasenloch mit Verengung und simulierter verkrümmter Nasenscheidewand
- Linkes Nasenloch mit normaler Weite
- Flexible Gesichtsstruktur mit weicher, beweglicher Zunge
- Nasenöffnungen zur Einführung eines Wendltubus
- Offener Mund zur Lagekontrolle des Wendeltubus und zum Einbringen eines Guedel-Tubus
- Gesicht inklusive linkem Ohr
- Für Übungen auf dem Tisch oder in der Hand geeignet
- Ideal für Rettungsdienst, Notfallmedizin, Pflege, Ausbildung und Simulation
- Preiswertes Trainingsmodell mit hoher Praxisnähe



Product Features

- Realistic airway trainer for airway management
- Anatomically accurate airway extending to the epiglottis
- Different nasal anatomies for varying levels of difficulty
- Narrower right nostril simulating a deviated nasal septum
- Left nostril with normal opening
- Flexible facial structure with a soft, movable tongue
- Nasal openings for inserting a Wendl tube
- Open mouth for checking the position of the Wendl tube and for inserting a Guedel airway
- Face includes the left ear
- Suitable for tabletop or handheld exercises
- Ideal for emergency medical services, emergency medicine, nursing, training, and simulation
- Cost-effective training model with high practical relevance



Ideal für das Training von:

- Einführen eines Wendltubus (Nasopharyngealtubus)
- Umgang mit unterschiedlichen anatomischen Gegebenheiten bei der nasopharyngealen Atemwegssicherung
- Lagekontrolle des Wendltubus
- Einführen eines Guedel-Tubus (Oropharyngealtubus)
- Anatomische Orientierung im oberen Atemweg
- Grundlagen des Atemwegsmanagements

Ideal for training in:

- Insertion of a nasopharyngeal tube
- Management of different anatomical conditions during nasopharyngeal airway insertion
- Positioning of the nasopharyngeal tube
- Insertion of a Guedel airway (oropharyngeal tube)
- Anatomical orientation in the upper airway
- Basics of airway management

Pflegehinweise:

Silikonoberflächen nach der Anwendung mit einem weichen, feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel reinigen. Anschließend vollständig trocknen lassen. Keine aggressiven Reinigungs- oder Desinfektionsmittel, Lösungsmittel, Scheuermittel oder alkoholhaltigen Produkte verwenden, da diese das Material beschädigen können.

Silikon ist widerstandsfähig, jedoch nicht unzerstörbar. Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfkantigen oder spitzen Gegenständen wie Uhren, Schmuck oder ähnlichen Objekten, da diese Beschädigungen verursachen können.

Das Produkt trocken, sauber und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Verwenden Sie ausschließlich Kunstblut, das die Haut nicht dauerhaft verfärbt.

Product Features:

After use, clean silicone surfaces with a soft, damp cloth and a mild detergent. Then let them dry completely. Do not use harsh cleaning agents, disinfectants, solvents, abrasive cleaners, or alcohol-based products, as these can damage the material.

Silicone is durable, but not indestructible. Avoid contact with sharp-edged or pointed objects such as watches, jewelry, or similar items, as these can cause damage.

Store the product in a dry, clean place, protected from direct sunlight.

Use only fake blood that does not permanently stain the skin.

Erler-Zimmer Medical GmbH

Hauptstrasse 27 · 77886 Lauf · Germany
T +49 7841 / 67191-0 · F +49 7841 / 67191-99
info@erler-zimmer.de
www.erler-zimmer.de



Follow us!

