


Produkt Information

CARE AND EVACUATION MANIKIN COMBAT CARL

Art. Nr.: T3C



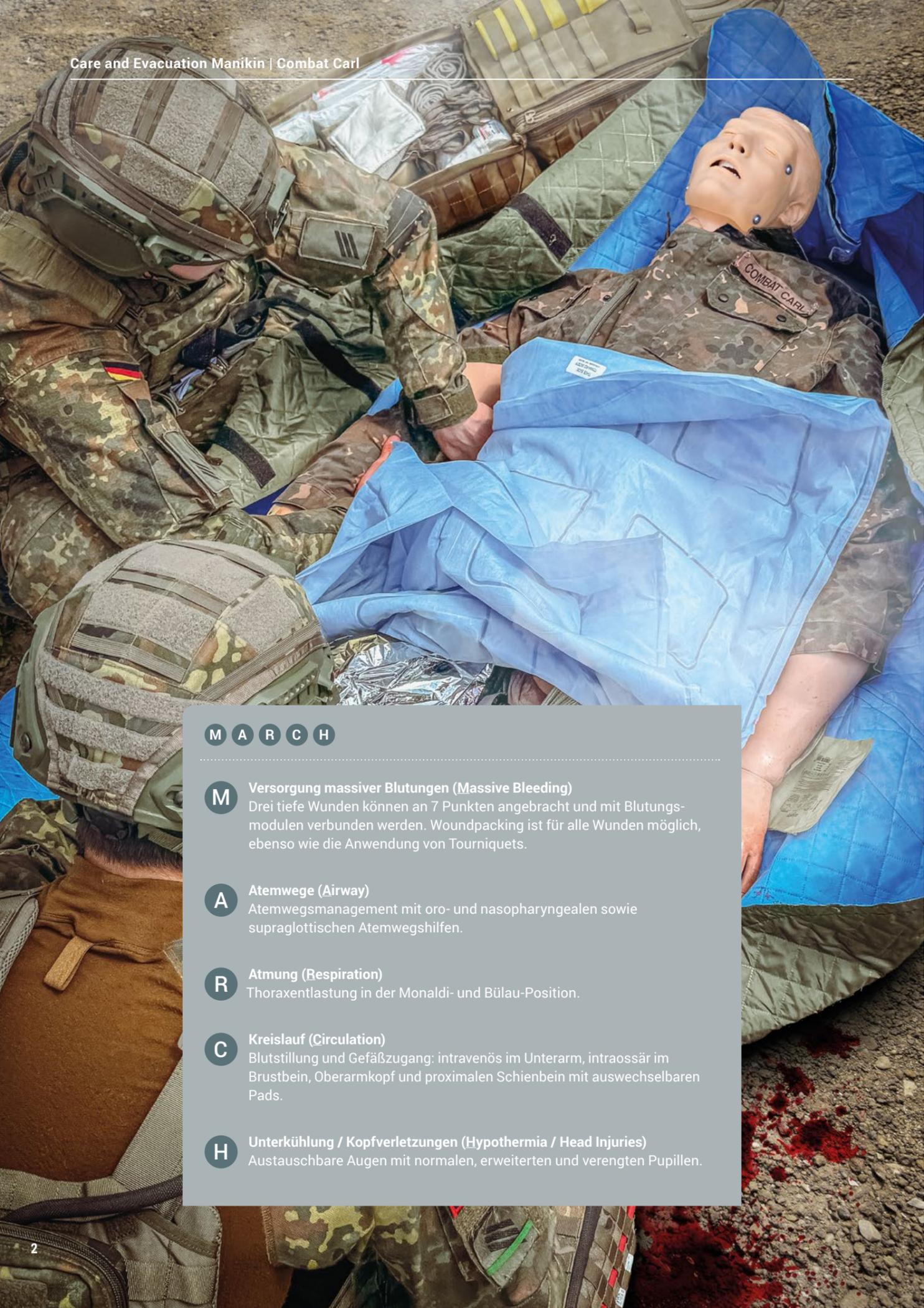

M A R C H

- M** **Versorgung massiver Blutungen (Massive Bleeding)**
Drei tiefe Wunden können an 7 Punkten angebracht und mit Blutungsmodulen verbunden werden. Woundpacking ist für alle Wunden möglich, ebenso wie die Anwendung von Tourniquets.
- A** **Atemwege (Airway)**
Atemwegsmanagement mit oro- und nasopharyngealen sowie supraglottischen Atemwegshilfen.
- R** **Atmung (Respiration)**
Thoraxentlastung in der Monaldi- und Bülow-Position.
- C** **Kreislauf (Circulation)**
Blutstillung und Gefäßzugang: intravenös im Unterarm, intraossär im Brustbein, Oberarmkopf und proximalen Schienbein mit auswechselbaren Pads.
- H** **Unterkühlung / Kopfverletzungen (Hypothermia / Head Injuries)**
Austauschbare Augen mit normalen, erweiterten und verengten Pupillen.



Atemwegsmanagement nasopharyngeal



Atemwegsmanagement oropharyngeal



Stimme des Patienten



Austauschbare Augen



Verletzung im Bereich des Thorax



Entlastungspunktion nach Monaldi



Sternal intraossärer Zugang



Wundversorgung




i.v. Kanülierung



Thorax-Drainage



IO-Zugang Oberarm

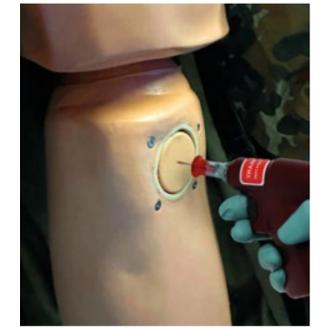

IO-Zugang Schienbein




TQ-Anlage (Tourniquet)



Amputationsstumpf Bein (optional)




Verband-techniken

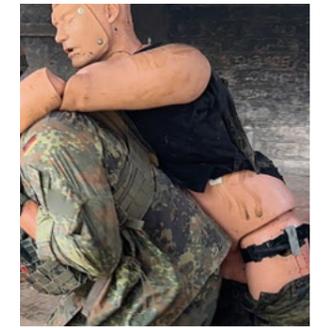

Trage-techniken

Eigenschaften:

- + Gewicht von ca. 65 kg bis 85 kg
- + Realistische Größe 175 cm
- + Robustes PVC-Material
- + Ideal für den Einsatz im Freien unter extremen Bedingungen (Sand, Regen, Schlamm usw.)
- + Wund-Einsätze an 7 Stellen austauschbar
- + Flexible Gliedmaßen für verschiedene Tragetechniken
- + Keine empfindliche Elektronik
- + Made in Germany
- + cABCDE-Schema – Konform
- + XABCDE-Schema – Konform
- + MARCH-Schema – Konform
- + Sprachmodul über Bluetooth (wasserdicht bis zu 1 Meter gemäß IPX7)
- + Austauschbare Augen, 3 Paar (normal, erweitert, verengt)
- + Atemwegsmanagement (oropharyngeal und nasopharyngeal)
- + Stichwunde, Einschuss - und Austrittswunde, Blindabdeckung enthalten
- + Wunden haben eine Blutungsfunktion für manuelle oder automatische Blutungsmodule über Fernbedienung (optional)
- + Anwendung des Tourniquets
- + Verbandstechniken
- + Intraossärer Zugang Schienbein
- + Intraossärer Zugang Oberarm
- + Intraossärer Zugang Brustbein
- + Thoraxentlastung nach Monaldi
- + Thoraxentlastung nach Bülau
- + Intravenöse Injektion

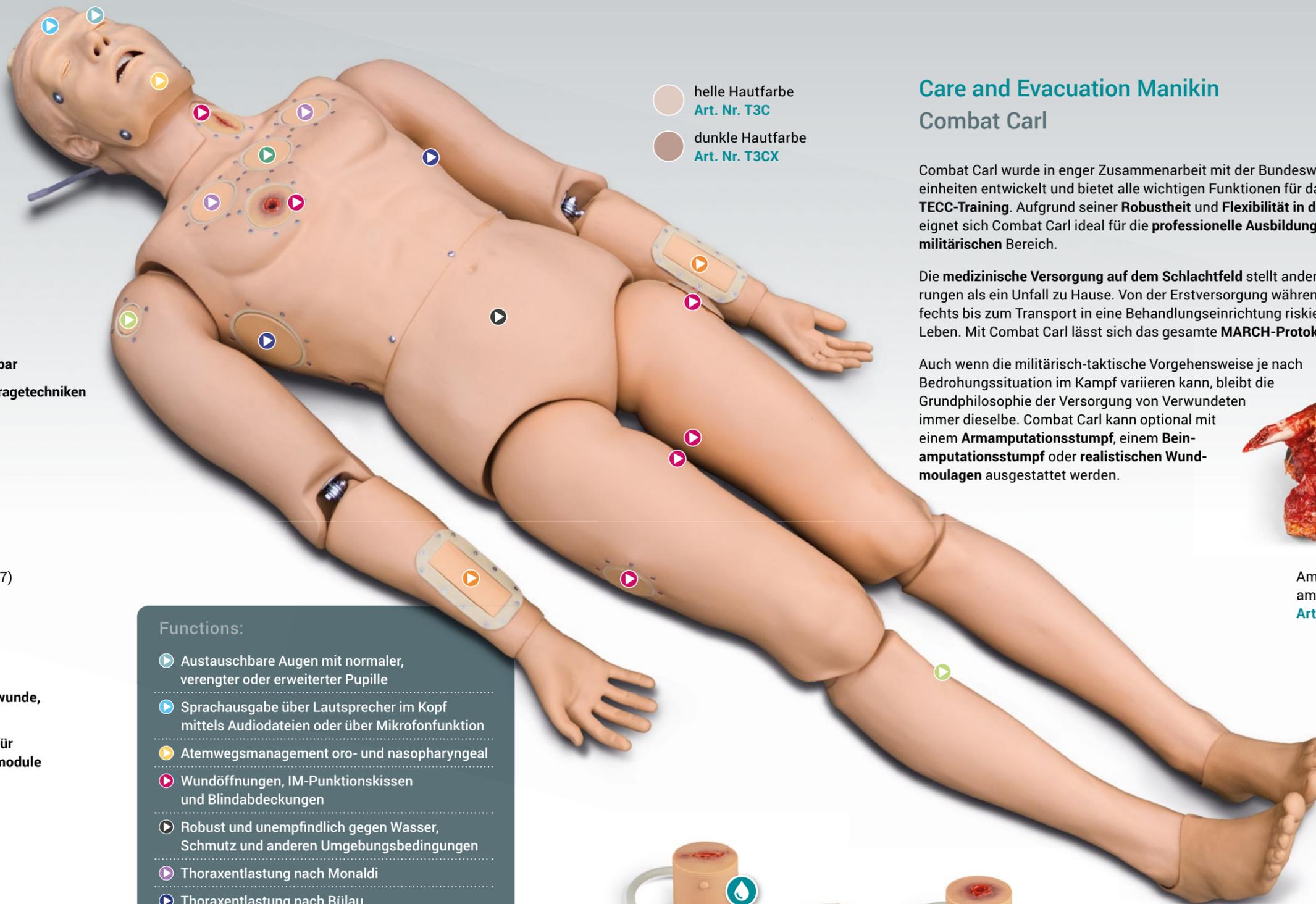

- helle Hautfarbe
Art. Nr. T3C
- dunkle Hautfarbe
Art. Nr. T3CX

Functions:

- ▶ Austauschbare Augen mit normaler, verengter oder erweiterter Pupille
- ▶ Sprachausgabe über Lautsprecher im Kopf mittels Audiodateien oder über Mikrofonfunktion
- ▶ Atemwegsmanagement oro- und nasopharyngeal
- ▶ Wundöffnungen, IM-Punktionskissen und Blindabdeckungen
- ▶ Robust und unempfindlich gegen Wasser, Schmutz und anderen Umgebungsbedingungen
- ▶ Thoraxentlastung nach Monaldi
- ▶ Thoraxentlastung nach Bülau
- ▶ IV-Zugangsmöglichkeit
- ▶ I.O.-Zugang FAST
- ▶ I.O.-Zugang

**Care and Evacuation Manikin
Combat Carl**


Combat Carl wurde in enger Zusammenarbeit mit der Bundeswehr und Spezialeinheiten entwickelt und bietet alle wichtigen Funktionen für das **TCCC- und TECC-Training**. Aufgrund seiner **Robustheit** und **Flexibilität in den Extremitäten** eignet sich Combat Carl ideal für die **professionelle Ausbildung** im **zivilen** und **militärischen** Bereich.

Die **medizinische Versorgung auf dem Schlachtfeld** stellt andere Herausforderungen als ein Unfall zu Hause. Von der Erstversorgung während eines Feuergefechts bis zum Transport in eine Behandlungseinrichtung riskieren Soldaten ihr Leben. Mit Combat Carl lässt sich das gesamte **MARCH-Protokoll** abbilden.

Auch wenn die militärisch-taktische Vorgehensweise je nach Bedrohungssituation im Kampf variieren kann, bleibt die Grundphilosophie der Versorgung von Verwundeten immer dieselbe. Combat Carl kann optional mit einem **Armamputationsstumpf**, einem **Beinamputationsstumpf** oder **realistischen Wundmoulagen** ausgestattet werden.



Amputationsstumpf am rechten Bein
Art. Nr. T3C9

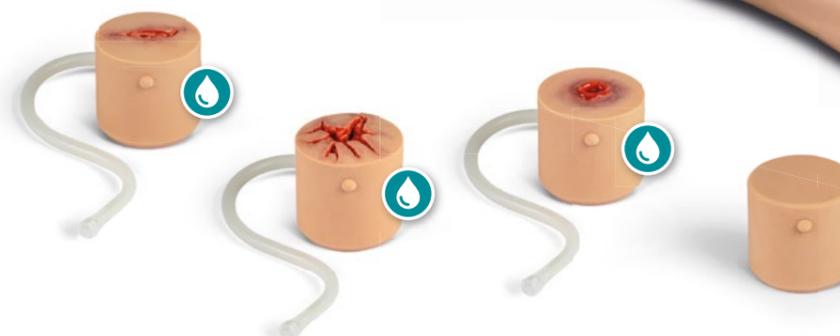

Einsatz mit Stichwunde
Art. Nr. T3C3

Einsatz mit Schussaustritt
Art. Nr. T3C4

Einsatz mit Schusseintritt
Art. Nr. T3C5

Einsatz mit Blindstopfen
Art. Nr. T3C6

Blutungsfunktion enthalten

Ersatzteile und Zubehör



Ersatzgesicht mit Atemwegen
Art. Nr. T3C1



Augen-Set für Combat Carl
Art. Nr. T3C8



Bluetooth-Lautsprecher für den Kopf
Art. Nr. T3C2



Einsatz „Thorax-Dekompression“, 10 Stück
Art. Nr. T3CA



Einsatz „Thoraxdrainage“, 10 Stück
Art. Nr. T3CB



Einsatz "FAST1", 10 Stück
Art. Nr. T3CC



Einsatz „EZ-10“, 10 Stück
Art. Nr. T3CD



Einsatz "IV", 10 Stück
Art. Nr. T3CE



Kunstblut, 2000 ml
Art. Nr. NW599

Basis Blutungssystem
Art. Nr. T3C7



Kleidung mit Klettverschlüssen
(muss während der Übung nicht
zerschnitten werden und ist daher
wiederverwendbar).
Art. Nr. T3C12



Transportkoffer
Art. Nr. PP100C



EXPERTS IN MEDICAL EDUCATION

Erlor-Zimmer GmbH & Co. KG

Hauptstraße 27 · 77886 Lauf · Germany

T (+49) 7841 / 67191-0 · F (+49) 7841 / 67191-99

info@erler-zimmer.de

www.erler-zimmer.de

Follow us!

